



検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度下記項目につきまして、検査内容の変更及び検査の受託中止をすることになりましたのでご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。

謹白



● 検査内容の変更 (☞ 2ページ)

依頼コードNo.	項目名
6117	MMP-3 (マトリックスメタロプロティナーゼ-3)
680	エラスターゼ1
3492	可溶性ELAM-1
9423	SP-D(肺サーファクタントプロテインD)

変更日 2008年10月1日(水)受付分より

● 専用容器保存方法の変更(☞ 4ページ)

依頼コードNo.	項目名
893	-TG(ベータトロンボグロブリン) (容器番号: B-16)
894	PF-4(血小板第4因子) (容器番号: B-16)

実施日 2008年9月1日(月)出庫分より

● 報告名称の変更 (☞ 4ページ)

依頼コードNo.	項目名
5065	HIV-1抗体WB法

変更日 2008年10月1日(水)報告分より

● 検査の受託中止 (☞ 4ページ)

依頼コードNo.	項目名
170	コルチゾール(尿)/FPIA法
4290	白血病タイピング
59583	マロープラズマ38

最終受託日 2008年9月30日(火)受付分まで

検査内容の変更


《変更日：2008年10月1日(水) 受付分より変更》

MMP-3 (マトリックスメタロプロティナーゼ-3) (依頼コードNo.6117)

従来法より再現性に優れた測定試薬に変更させていただきます。

この変更に伴い、測定方法・報告日数を変更させていただきます。

尚、基準値等の変更はございません。

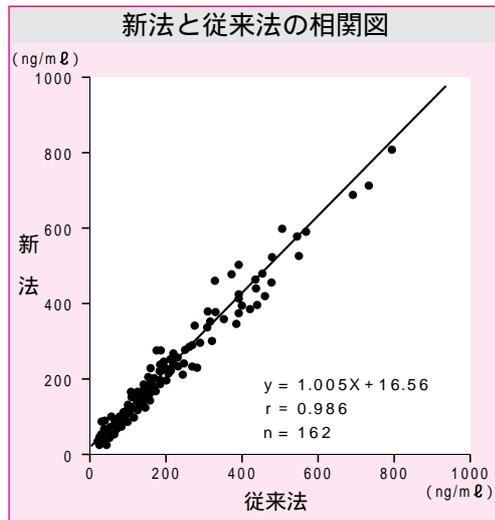

自社検討資料

	新	従来
測定方法	ラテックス凝集比濁法	EIA法
報告日数	2～3日	3～5日


【測定方法参考文献】

氏家真二, 他: 医学と薬学 51: 503～506, 2004

エラスターゼ1

(依頼コードNo.680)

従来法より再現性に優れ、かつ血清中の自己抗体の影響を受けにくい試薬に変更させていただきます。この変更に伴い、測定方法・基準値を変更させていただきます。

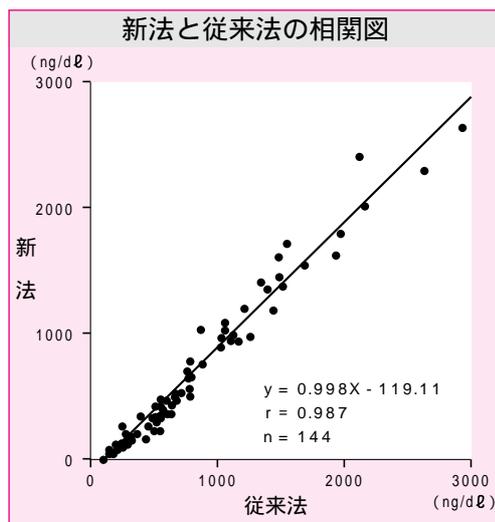

自社検討資料

	新	従来
測定方法	ラテックス凝集比濁法	RIA・2抗体法
基準値	300 ng/dL 以下	72～432 ng/dL


【測定方法参考文献】

大出勝也, 他: 臨床病理 50: 376～380, 2002

可溶性ELAM-1

(依頼コードNo.3492)

従来試薬より安定供給可能な測定試薬に変更させていただきます。
この変更に伴い、基準値を変更させていただきます。

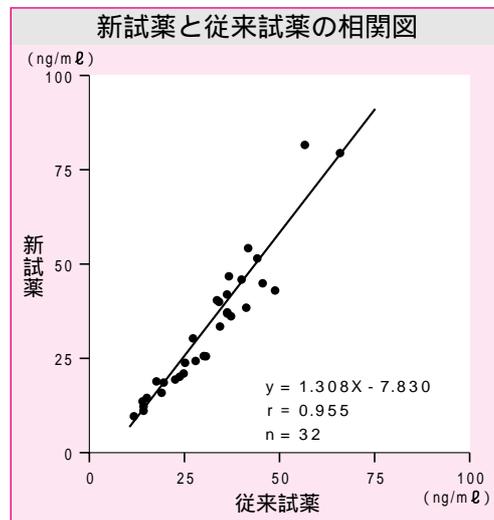

自社検討資料

	新	従来
基準値	17.9 ~ 79.2 ng/ml	23.5 ~ 66.1 ng/ml


【測定方法参考文献】

ANDREW J.H. et al : Soluble Forms of Vascular Adhesion Molecules, E-selection, ICAM-1, and VCAM-1 : Pathological Significance, Annals NewYork Academy of Science.

SP-D (肺サーファクタントプロテインD)

(依頼コードNo.9423)

従来試薬販売中止のため、同一試薬メーカーの改良試薬に変更させていただきます。
この変更に伴い、報告日数を短縮致します。尚、基準値等の変更はございません。

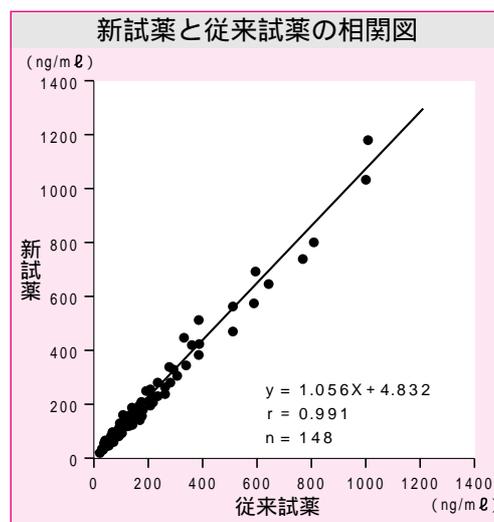

自社検討資料

	新	従来
報告日数	3 ~ 5日	3 ~ 6日

【測定方法参考文献】

田中誠仁, 他 : 医学と薬学 59(3) : 439 ~ 446, 2008

報告名称の変更

《変更日：2008年10月1日(水) 報告分より変更》

H I V - 1 抗体WB法

(依頼コードNo.5065)

試薬販売元よりバンドパターン表記名称変更の連絡がありましたので、当社でも下記のように変更させていただきます。

	新	従来
報告名称	P68/66	P68
	P52/51	P52
	P34/31	P34
	P18/17	P18

専用容器保存方法の変更

《実施日：2008年9月1日(月)より変更》

-TG(ベータトロンボグロブリン) (容器番号：B 16) (依頼コードNo.893)

PF 4(血小板第4因子) (容器番号：B 16) (依頼コードNo.894)

この度容器販売元より標記項目の容器保存方法変更の連絡があり、当社でも下記のように変更させていただきます。

	新	従来
専用容器保存方法	遮光冷蔵	室温

検査の受託中止

《最終受託日：2008年9月30日(火) 受付分まで》

下記項目の検査の受託を中止させていただきます。

ご愛用いただきました先生方にはご迷惑をお掛けすることとなりますが、諸事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【従来試薬の販売中止のため】

依頼コードNo.	受託中止項目	依頼コードNo.	関連項目
170	コルチゾール(尿)/FPIA法	4442	尿中コルチゾール/CLIA法 (非抱合型を測定)

【項目の見直しのため】

今後はCD45ゲーティングによるTwo-color解析による白血病細胞表面マーカー検査(依頼コードNo.298)でご依頼下さい。

依頼コードNo.	受託中止項目	依頼コードNo.	関連項目
4290	白血病タイピング	298	Two-color解析による 白血病細胞表面マーカー検査 (白血病解析セット)

【セット検査の見直しのため】

今後は抗体治療薬の普及により临床上より有用となってきたCD20を組み込みCD33をはずした項目(依頼コードNo.59737)でご依頼下さい。

依頼コードNo.	受託中止項目	依頼コードNo.	関連項目
59583	マロープラズマ38	59737	マロープラズマ38 (骨髓腫-CD20セット)